



ВИБРОТЕХНИК

Авангард российского оборудования
для точного измельчения



Победитель конкурсов по качеству
«100 лучших товаров России», «Сделано в России»
и «Сделано в Петербурге»

Протокол проведения испытаний № РМ 120/18

Материал: Корм импортный для лошадей

Раздел 1. Постановка задачи.

1.1 Свойства исходного материала: Легкий, сухой, непрочный материал;

1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала: Гранулы диаметром около 2 мм и длиной около 5 мм;

1.3 Поставленная задача: Измельчение до крупности менее 1 мм;

1.4 Используемое оборудование:



Рис. 1. Роторная ножевая мельница РМ 120



Рис. 2. Анализатор А 20

Раздел 2. Проведений испытаний.

2.1 Измельчение на Роторной ножевой мельнице РМ 120

2.1.1 Вес пробы: 200 г;

2.1.2 Время измельчения: 1 мин 50 сек;

2.1.3 Производительность: 6,5 кг/час;

2.1.4 Результат:



Рис. 3. Материал до измельчения



Рис. 4. Продукт измельчения

Раздел 3. Результат испытаний.

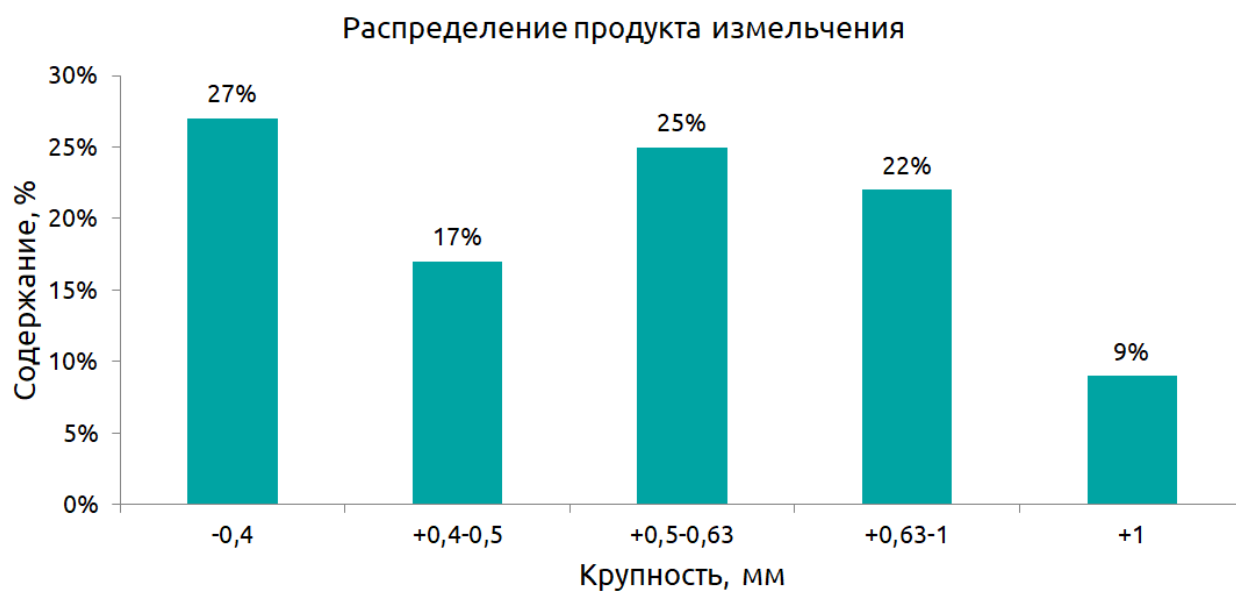


Рис. 5. Распределение продукта измельчения